


Kabel-Typ		SMEK-Nr.	1	6	2	3	4	5		
		VP-Nr.	A (1)	B (2)	C (3)	D (4)	E (5)	F (6)	G (7)	H (8)
KA 14	Koax + 4 Litzen + Schirm	(80°C)	Seele1 (farblos)	Schirm1 (schwarz)	grau	blau	weiß	grün	-	-
KA 18	2 Koax + 4 Litzen + Schirm	(120 °C)	Seele1 (far blos)	Schirm1 (schwarz)	Seele 2	Schirm 2	weiß	grün	gelb	braun
KA 19	Koax + 4 Litzen + Schirm	(130 °C)	Seele1 (farblo s)	Schirm1 (schwarz)	braun	gelb	weiß	grün	-	
KA 20	6 Li	(80°C)	rot	schwarz	braun	gelb	orange	grün		
äußerer Schirm: Litze grün/gelb (Erdung)										
Elektrodenbeispiel										
Typ-Nr.	Meßgrößen	Kabel								
PL 81-xxx; SL 81-xxx	pH + °C	KA 19,14,18	pH	Bez.- El.	-	-	T1	T2		
SL 82-xxx; PL 82-xxx	pH + °C	KA 19,14,18	pH	Bez.- El.	Brücke zu T1	-	T1	T2		
PETR	pH + °C + Redox	KA 19,14,18	pH	Bez.- El.	-	Redox	T1	T 2		
PETL	pH + °C + mS	KA 14,18	pH	Bez.- El.	LF Hi	LF Low	T1	T2		
DPET	Doppel-pH + °C	KA 18	pH 1	Bez.- El. 1	pH 2	Bez.- El. 2	T1	T2		
LF4TH, LF 71	LF-4-Pol + °C	KA 18	LF U hi	LF I hi	LF U lo	LF I lo	T1	T2,HE		
LF2TH	LF-2-Pol + °C	KA 19,14,18	LF U hi	Brücke zu U hi	LF U lo	Brücke zu U lo	T1	T2,HE		
LF 51, LF1100	LF-2-Pol	KA 19,14,18	LF U hi	Brücke zu U hi	LF U lo	Brücke zu U lo				
LF 51T, LF1101T	LF-2-Pol + °C	KA 19,14,18	LF U hi	Brücke zu U hi	LF U lo	Brücke zu U lo	T1	T2,HE		
LF1101THD+AL63LFT	LF-2-Pol + °C	KA 19,14,18	LF U hi	Brücke zu U hi	LF U lo	Brücke zu U lo	T1	T2		
W2061 HD	°C + Pt-Ring	KA 19,14,20,18	Brücke zu T2	-	Brücke zu T1	Redox	T1	T2		
OX1101/OX1100+	Ox + °C		Kathode (Pt)	Anode (Ag)			T1	T2		
W2021/W2081 HD	°C	KA 19,14,20,18	Brücke zu T2	-	Brücke zu T1	-	T1	T2		
W2030/W2130	°C	KA 19,14,20,19	Brücke zu T2	-	Brücke zu T1	-	T1	T2		
W4081/W4181 HD	2 x °C	KA 19,14,20,18	T3	-	T4	-	T1	T2		

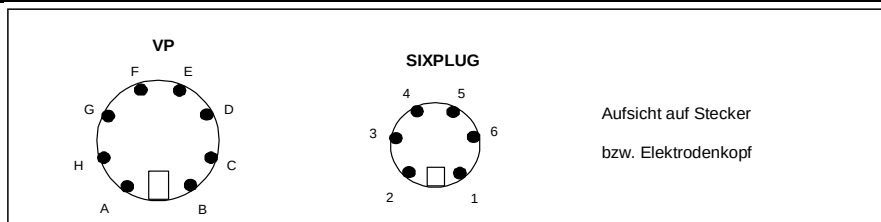

ACHTUNG auf die
Brücke im Elektrodenkopf